

Cavite perfect /5054

Nova tehnika oblikovanja tela

Aparat Cavite perfect je zasnovan na savremenoj tehnologiji kavitacije i osigurava efektivno poboljšanje telesnog izgleda.

Bezbolna, prijatna metoda

Metoda uzv kavitacije osigurava prijatnu i uspešnu alternativu hirurškim intervencijama.

Terapija sa dramatičnim poboljšanjem izgleda

Zavisno od vrste celulita i područja koje se tretira, biraju se odgovarajući programi. Oblikovanje stomaka, bedara, bokova, nadlaktice, natkolenice i gluteusa. Nakon samo jednog tretmana obim tretiranog dela tela se smanjuje za nekoliko centimetara.



Delovanje i dobrobit kavitacije

Sprovodi se na način da se područje koje se želi tretirati prelazi sondom putem koje niskofrekventni ultrazvučni talasi prodiru u područje potkožnog masnog tkiva gde dolazi do selektivnog razbijanja masnih ćelija bez da se oštećuje okolno tkivo.

Cavite perfect deluje samo na masne ćelije, dok koža, cirkulatorni sistem, nervni i mišićni sistem ostaju netaknuti.

PROGRAMI:

- Normal cavitation
- Continious cavitation
- Pep system
- Pulse system

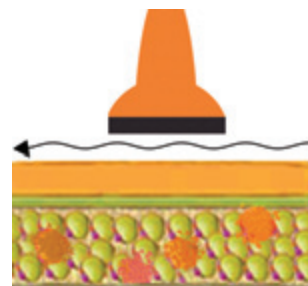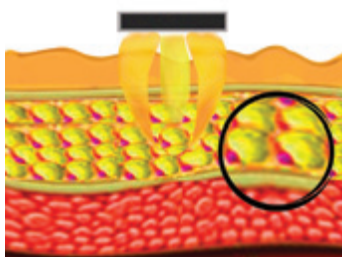

Metoda kavitacije predstavlja prelomnu tačku u problematiki rešavanja celulita i prekomernih masnih naslaga na pojedinim delovima tela. Stroga dijeta, naporno i dugotrajno vežbanje i hirurška intervencija (liposukcija) do sada su bile metode kojima se nastojalo rešiti problem celulita.

Kavitacija je neinvazivna i bezbolna terapija bez neželjenih efekata koja omogućava brz, siguran i jedinstven rezultat u oblikovanju tela.

Kako deluje kavitacija?

Kavitacija je proces koji počinje kada niskofrekventni ultrazvučni talasi mehanički "buše" membrane masnih ćelija pri čemu dolazi do oslobađanja masnoća u obliku triglicerida u međućelijsku tečnost. Ostaci razbijenih masnih ćelija eliminišu se putem limfnog sistema i jetre. Niskofrekventni talasi su fokusirani na tačno određenoj dubini gde se vrši selektivno razbijanje potkožnih masnih ćelija (Lyses of Adipocytes) bez oštećenja okolnog tkiva.

Tretman Cavite perfectom pruža gotovo jednake rezultate kao estetski zahvat, ali bez anestezijske, bolova i dugotrajnog oporavka. Posle tretmana se primenjuje limfna drenaža kako bi se razbijene masne ćelije što lakše uklonile iz organizma.

Tehničke karakteristike:

- » Model: 5054
- » Izvor energije: piezoelektrični pretvarač
- » Frekvencija: 28 KHz
- » Izlazna snaga: do 50 W
- » Vreme terapije: do 50 min
- » Broj programa: 4
- » Mrežni napon: 220 V, 50/60 Hz
- » Dimenzije: D/Š/V 580x440x110-290 mm
- » Težina: 12 kg